




UCAN
MILL

GEFREESD DESIGN
BY CANDULOR

CANDULOR.

Wij begrijpen prothetiek sinds 1936.

Freesdiscs voor volledige protheses,
gedeeltelijke en hybride protheses en
implantaatgedragen protheses.

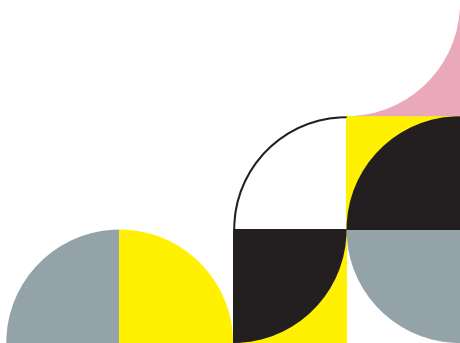

TCR MONO



🧪	Materiaal	TwinCrossedResin
⊗	Eigenschap	Goede weerstand tegen slijtage en resistentie tegen plaque
⌈⌋	Dikte	20 mm
∅	Diameter	98.5 mm

TCR MONO

Korte omschrijving

TCR Mono is een tandkleurige monochroom gekleurde freesdisc voor de CAD/CAM-techniek. De Freesdiscs zijn gemaakt van TCR-materiaal (TwinCrossedResin), dat al meer dan 40 jaar bekend is op de markt. Het TCR-materiaal (TwinCrossedResin) is een sterk gemodificeerde variant van polymethylmethacrylaat (PMMA), waarbij zowel de polymeer als de matrix gelijkmatig zijn vernet.

Kleurtinten

A1, A2, A3, A3,5, B1, B3, C2, D2

Bleachkleurtint: BL3

Soorten restauraties

- Volledige protheses
- Gedeeltelijke protheses
- implantaatgedragen protheses
- Elementgedragen protheses



TCR MULTI



🧪	Materiaal	TwinCrossedResin
⊗	Eigenschap	Sterke esthetiek dankzij natuurlijke translucentie, een aantrekkelijk oppervlak- teontwerp en harmonieus kleurverloop
⌈⌋	Dikte	20 mm
∅	Diameter	98.5 mm

TCR MULTI

Korte omschrijving

TCR Multi is een multichromatisch gekleurde freesdisc, bestaande uit drie lagen.

Met de reeksen gebitselementen PhysioSet TCR en Physio-Select TCR, die ook bestaan uit het beproefde TCR-materiaal, kunnen hybride werkstukken worden gemaakt uit één materiaalfamilie.

Kleur tinten

A1, A2, A3, A3,5, B1, B3, C2, D2

Bleachkleurtint: BL3

Soorten restauraties

- Volledige protheses
- Gedeeltelijke protheses
- implantaatgedragen protheses
- Elementgedragen protheses



XPLEX BASE



🧪	Materiaal	XPLEX
⊗	Eigenschap	Hoge slagvastheid, weinig aanhechting van plaque en geringe neiging tot verkleuren
⏏	Dikte	30 mm
∅	Diameter	98.5 mm

XPLEX BASE

Korte omschrijving

XPLEX Base is een PMMA-Freesdisc voor de vervaardiging van prothesebases voor uitneembare protheses, door middel van een freesmachine (CAM).

De freesdisc zijn gemaakt van het beproefde XPLEX-materiaal, een slagvast PMMA-materiaal van high-impact-kwaliteit.

Kleurtinten

1 Soft Pink – transparant, niet geaderd

5 Pink – transparant, geaderd

34 Original Pink – semi-opaak, geaderd

Soorten restauraties

- Volledige protheses
- Gedeeltelijke protheses
- implantaatgedragen protheses
- Elementgedragen protheses



XPLEX BOND



🧪	Materiaal	Materiaal op basis van PMMA
⚗️	Eigenschap	polymeriserend
☰	Inhoud	Set met XPLEX Bond-polymeer (10 stuks), XPLEX Bond-monomeer (10 stuks), XPLEX Bond Modelling Liquid (1 stuks), applicatiespuiten (10 stuks), canules (10 stuks)

XPLEX BOND

Korte omschrijving

XPLEX Bond is een compoundmateriaal op PMMA-basis om gebitselementen en segmenten op kunststofbasis te bevestigen in een voorgefabriceerde prothesebasis.

De set bevat 10 voorgedoseerde monomeer- en polymeerflesjes voor het realiseren van een optimale mix.

Toepassingen

- Verbinden van confectie-elementen met een gefreesde of geprinte basis
- Verbinden van gefreesde elementen met een gefreesde basis



Een keer proberen?
Wij geven u graag advies.

Candulor Dental GmbH

Am Riederngraben 6


D-78239 Rielasingen-Worblingen


T + 49 (0) 7731 79783-0

F + 49 (0) 7731 28917

E info@candulor.de

W candulor.com

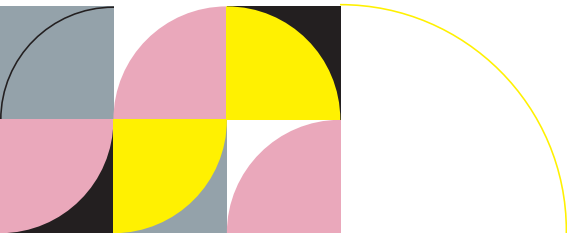

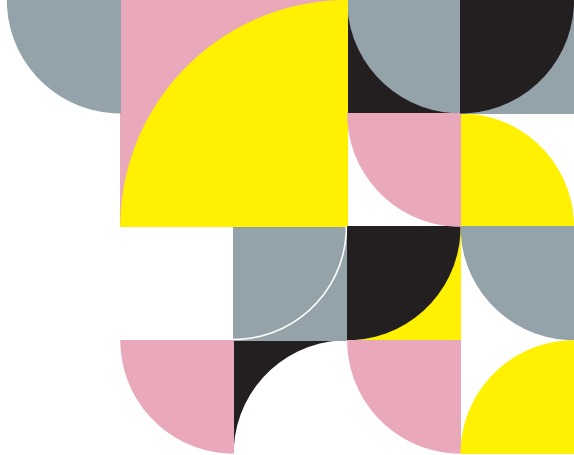

768676/nl/2025-02-01

CANDULOR. HIGH END ONLY.