

PHYSIOSTAR® NFC+

Artikulationstabelle | Articulation Table

PHYSIOSTAR® NFC+		CONDYLOFORM® II NFC+	BONARTIC® II NFC+
OBERE UPPERS	UNTERE LOWERS	OBERE UND UNTERE UPPERS AND LOWERS	OBERE UND UNTERE UPPERS AND LOWERS
GRAZIL			
550	992 996*	34	02
552	990 992*	34	02
554	992 996*	34 36	02 04
556	996 998*	36 38	04 06
UNIVERSELL			
660	990 992*	34 36	02 04
662	992 994*	34 36	02 04
664	992 994*	34 36	02 04
666	996 998*	36 38	04 06

PHYSIOSTAR® NFC+		CONDYLOFORM® II NFC+	BONARTIC® II NFC+
OBERE UPPERS	UNTERE LOWERS	OBERE UND UNTERE UPPERS AND LOWERS	OBERE UND UNTERE UPPERS AND LOWERS
MARKANT			
770	992 994*	34	02
772	992 994*	36 38	04 06
774	996 998*	36 38	04 06
776	996 998*	36 38	04 06
INDIVIDUELL			
880	992 994*	36	04
882	994 996*	36 38	04 06
884	994 998*	38	06

* Diese Formen eignen sich für die Gerber Aufstelltechnik (Condyloform® II NFC*). | These moulds are suitable for the Gerber technique (Condyloform® II NFC*).

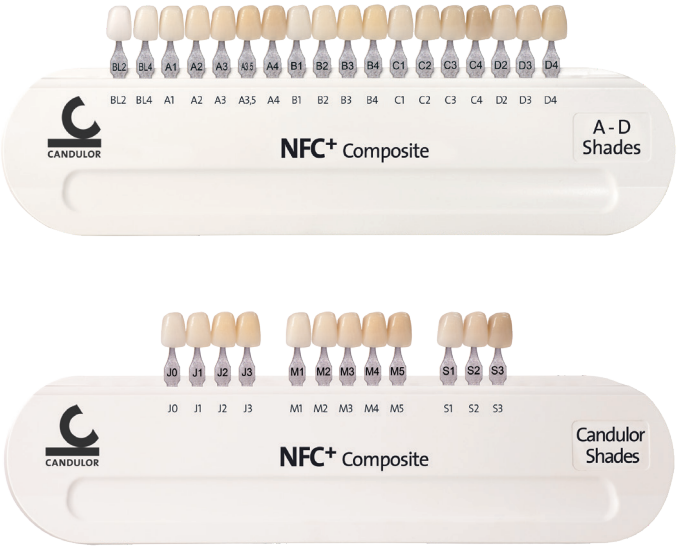
PHYSIOSTAR® NFC+

Farbsystem | Shade system

12 Candolor Farben | Shades:
J0, J1, J2, J3, M1, M2, M3, M4, M5,
S1, S2, S3

16 A–D Farben | Shades:
A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4,
C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4

2 Bleach Farben | Shades:
BL2, BL4



Verarbeitungshinweise für Candulor Prothesenzähne

Es gilt zu beachten, dass die Beständigkeit der Zähne beibehalten wird und eine korrekte Farbwirkung erhalten bleibt. Daher wird empfohlen, eine Mindestschichtstärke nicht zu unterschreiten.

Mindestschichtstärke für PMMA-/Komposit-Zähne:

- > Frontzähne: mind. 2,5 mm
- > Seitenzähne: Zentralfossa mind. 2,0 mm, in Höckerspitzen mind. 2,5 mm, im zervikalen Bereich mind. 2,5 mm

Damit abnehmbare Prothesen im Mund auch über längere Zeit gut funktionieren, sollten folgende Voraussetzungen gegeben sein:

- > **Verwendung der Produkte nur durch professionellen Anwender.**
- > **Die zahntechnische Herstellung erfolgt nach allen Regeln der dentalen Kunst.**
- > Für einen sicheren Materialverbund, bei PMMA-/Komposit-Zähnen, mit dem Prothesenbasismaterial sollte der Zahn sauber abgedampft, angeraut und mit Monomer benetzt werden. Bei der Fertigstellung mit einem Autopolymerisat sind zusätzliche mechanische Retentionen zu empfehlen.
- > Die Zähne sollten nicht mit direkter Hitze oder einer Flamme in Kontakt kommen (durch z. B. Alkoholtorch).
- > Beim Schleifprozess sollte eine Hitzeentwicklung durch hohen Schleifdruck vermieden werden.
- > Ein Kontakt mit Lösungsmitteln sollte vermieden werden.

Processing instructions for CANDULOR denture teeth

It must be ensured that the stability of the teeth and the correct shade effect are maintained. It is therefore recommended to observe the minimum layer thickness.

Minimum layer thickness for PMMA/composite teeth:

- > Anterior teeth: min. 2.5 mm
- > Posterior teeth: Central fossa min. 2.0 mm, cusp tips min. 2.5 mm, cervical area min. 2.5 mm

To ensure that removable dentures remain functional over longer periods of time, the following prerequisites should be met:

- > **Dental materials may only be processed by dental professionals.**
- > **Fabrication in the dental laboratory according to the principles of best practice.**
- > To ensure a reliable material bond between PMMA/composite teeth and the denture base material, clean the teeth with steam, roughen them and apply monomer. When using an self-curing polymer for finishing, it is recommended to create additional mechanical retentions.
- > The teeth should not come into contact with a flame or direct heat (for example alcohol torch).
- > Heat development as a result of too much pressure during grinding must be prevented.
- > Contact with solvents must be prevented.

CANDULOR AG
Boulevard Lilienthal 8
CH-8152 Glattpark (Opfikon)
T +41 (0)44 805 90 00
F +41 (0)44 805 90 90
candulor.com
candulor@candulor.ch

CANDULOR Dental GmbH
Am Riederngraben 6
DE-78239 Rielasingen-Worblingen

EC REP



PHYSIOSTAR® NFC⁺

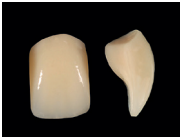
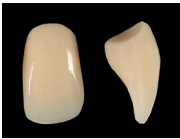
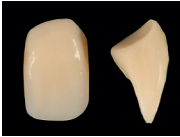
Zahnformenkarte | Tooth mould guide



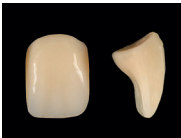
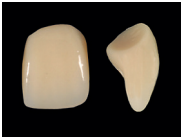
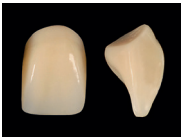
PHYSIOSTAR® NFC+

OBERKIEFER | UPPER JAW
FRONTZÄHNE | ANTERIORS

GRAZIL | DELICATE

550			11.80
	41.80	7.64	
552			9.80
	43.12	7.90	
554			12.00
	44.58	8.02	
556			12.10
	47.56	8.62	

UNIVERSELL | UNIVERSAL

660			10.30
	45.28	8.36	
662			10.20
	45.52	8.82	
664			10.30
	46.56	8.52	
666			12.30
	47.92	9.26	

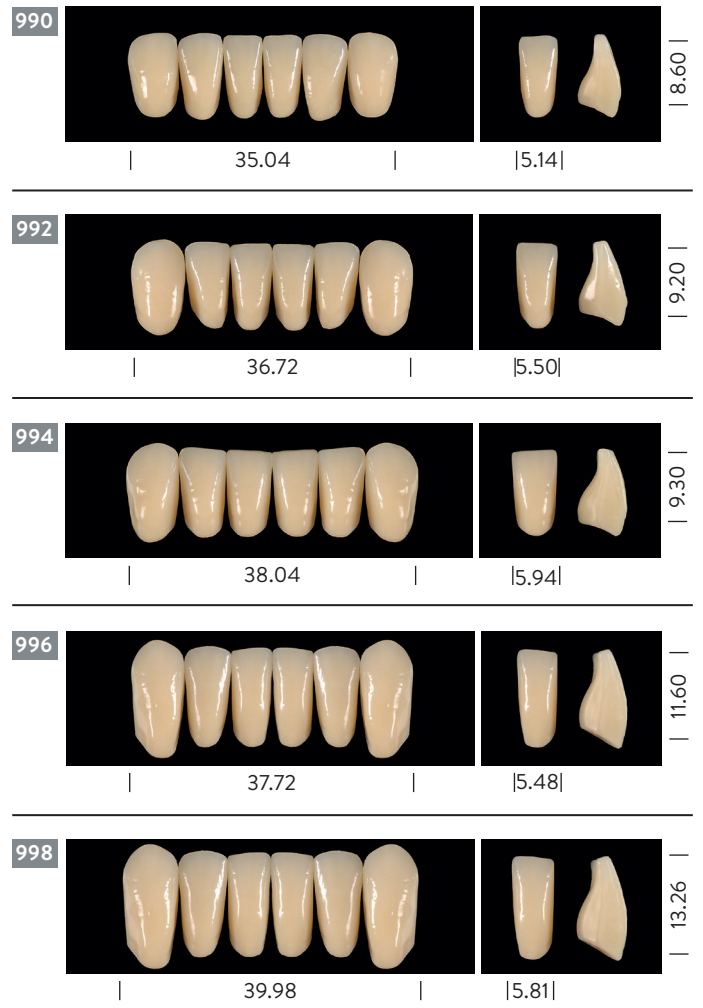
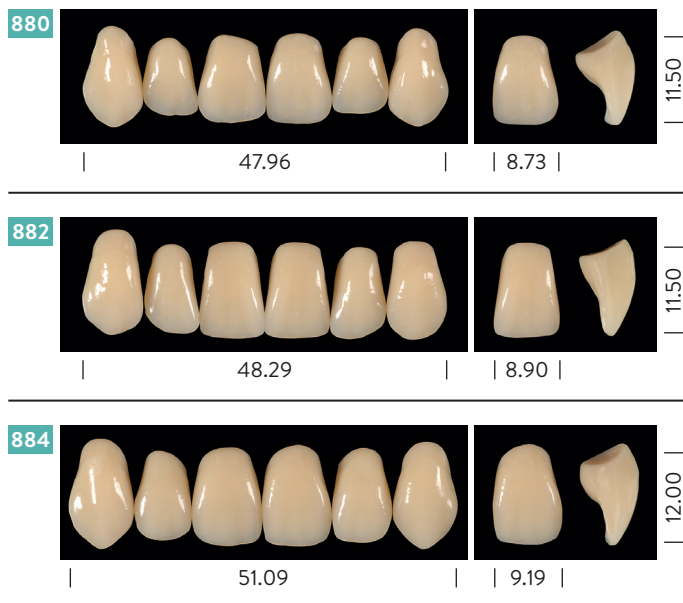
PHYSIOSTAR® NFC+

UNTERKIEFER | LOWER JAW
FRONTZÄHNE | ANTERIORS

MARKANT | VIGOROUS

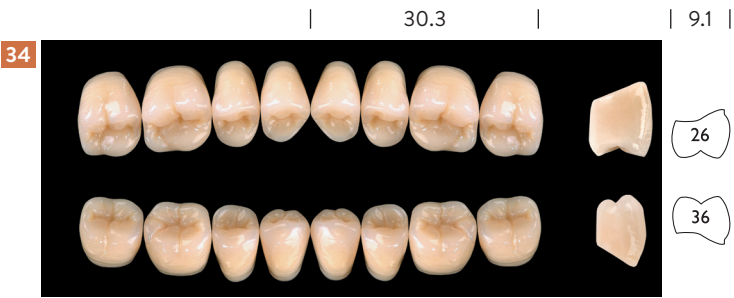


INDIVIDUELL | INDIVIDUAL



CONDYLOFORM® II NFC+

OBER- UND UNTERKIEFER | UPPER AND LOWER JAW
SEITENZÄHNE | POSTERIOR



BONARTIC® II NFC+

OBER- UND UNTERKIEFER | UPPER AND LOWER JAW
SEITENZÄHNE | POSTERIOR

