

# ARTIKULATOREN


# CANDULOR.

## Wir verstehen Prothetik seit 1936.

Artikulatoren für die Total-,  
Teil- und Hybridprothetik sowie  
Implantatprothetik.

### Pocket Portfolio

Das CANDULOR Pocket Portfolio bietet Ihnen eine kompakte und einfache Übersicht über die Artikulatoren, deren Besonderheiten und Verwendung.

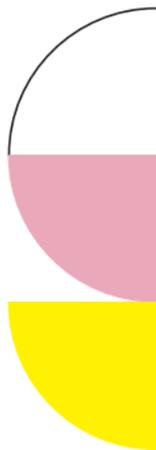

# ARTIKULATOREN



CA 3.0

CA 3.0 LARGE



## Material

eloxiertes Aluminium



## Eigenschaft

ermöglicht einfache, physiologische Bewegungsabläufe



## Technische Daten

- Bonwill-Dreieck: 110 mm
- Balkwill-Winkel: 25°
- Retrusionsbahn: 1,5 mm
- Immediate Side Shift-Anschlag: 0 – 2,5 mm fix
- Gelenkbahnneigung von 0° – 60° einstellbar
- Der Artikulator CA 3.0 und CA 3.0 LARGE unterscheiden sich in Ihrer Bauhöhe.

# Vorteile




Hohe Präzision möglich durch naturnahe Simulation des Kiefergelenks und Schaffung eines okklusalen Freiraums durch den naturanalogen Doppelkonus.



Vielseitig nutzbar, da für die komplette Prothetik und somit auch für alle gängigen Aufstelltechniken geeignet. Kombiniert mit unseren Condyliform II NFC+ Seitenzähnen ideal für die Gerber Aufstelltechnik.



Präzise Aufstell- und Orientierungshilfe mit integrierter Führungskerbe, sodass Gummiband, Inzispunktzeiger und Okklusionsebene auf einem Niveau liegen.

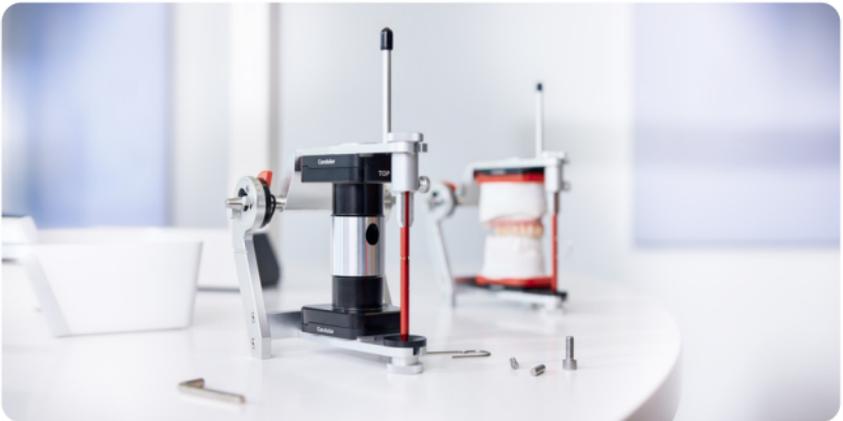

Erleichtertes Arbeiten durch das integrierte Split-Cast-System.

# Bewegungsmuster



Protrusionsbewegung



Lateral- und Bennettbewegung



Immediate Side Shift (ISS)  
Bewegung



Retrusions-Bewegung

# Zubehör



**1. Gesichtsbogenadapter**

Zur Übertragung von Fremdfabrikaten (Gesichtsbogen)  
in die CANDULOR Artikulatoren

**2. Adapter Gesichtsbogenhalter CA 3.0 LARGE**

**3. Gesichtsbogenhalter**

**4. Instrumententräger mit Einrichttisch**

(für Candulor Plattensysteme)

**5. Instrumententräger für Splitex®**

(für Splitex® Plattensystem)

# GLEICHSCHALTUNG



Unter Verwendung des Zubehörs für die Gleichschaltung lässt sich der CA 3.0 LARGE auf die Bauhöhe von 126mm anpassen und mit den Artex® Artikulatoren\* gleichschalten.

\*kompatibel mit Artex BN, Artex CN, Artex CT, Artex CPR, Artex CR;  
Splitex® und Artex® sind eingetragene Marken der Amann Girrbach GmbH,  
75177 Pforzheim, DE

# Vom Labor ...



- Für höhere Effizienz und Wirtschaftlichkeit im dentalen Workflow.

## ... in die Praxis



- Arbeitsprozesse werden vereinfacht: Im dentalen Workflow können die Modelle zwischen Labor und Praxis ohne den Artikulator weitergegeben werden.
- Geringere Fehlerquelle: Durch die Gleichschaltung der Artikulatoren können Fehler durch Übertragung vermieden werden.

# Einfache Kalibrierung



Artikulatoren sind perfekt kalibriert



Ungenauigkeiten in der Justierung werden mit dem geteilten Zentrierschlüssel einfach visualisiert

# Zubehör für die Gleichschaltung



1. Plattenset für Splitex®
2. Zentrierschlüssel kompatibel mit Splitex®
3. Modellplatten Kunststoff für Splitex®
4. Haftplatten für Splitex® Modellplatten (Ø 35mm)

Mal ausprobieren?  
Wir beraten Sie gerne.

**Candolor Dental GmbH**

Am Riederngraben 6


D-78239 Rielasingen-Worblingen

**T** +49 (0) 7731 79783-0

**F** +49 (0) 7731 28917

**E** [info@candolor.de](mailto:info@candolor.de)

**W** [candolor.com](http://candolor.com)

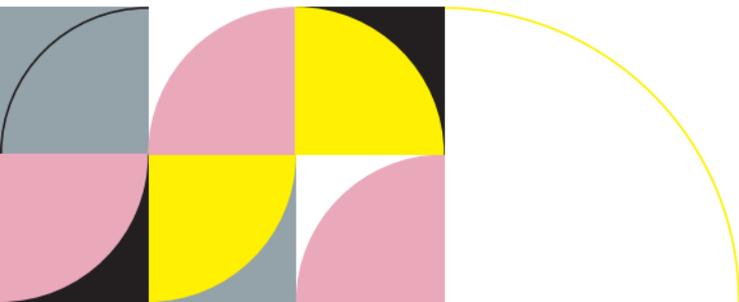

**CANDULOR. HIGH END ONLY.**