




UCAN
DESIGN


DIGITALES ZAHNDESIGN MADE BY CANDULOR

CANDULOR.

Wir designen Zähne
seit 1936.

Digitale Zahnformen
für herausnehmbaren
Zahnersatz.

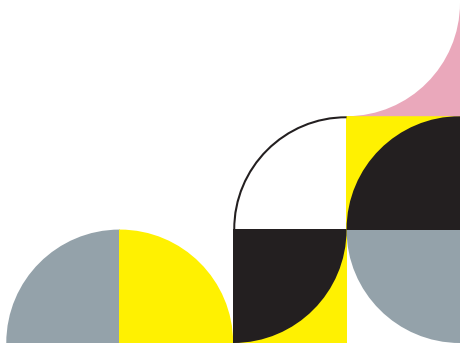

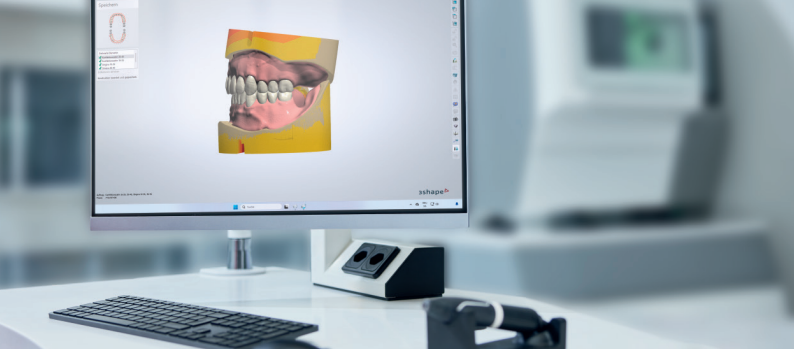

Das 3Shape® Dental System ist eine innovative dentale CAD-Designsoftware, die es ermöglicht, Prothesen digital zu designen und Arbeitsabläufe zu optimieren. Mit der Candolor Denture SmileLibrary + bietet sich Ihnen jetzt eine der grössten Zahnbibliotheken, inklusive Aufstellungen für die Totalprothetik. Das bedeutet, dass keine Einzelzähne hinterlegt sind, sondern in Okklusionsbeziehung stehende Ober- und Unterkiefer Totalprothesen. Die Software greift so auf eine idealisierte Aufstellung in der Datenbank zurück, wodurch Sie schnell zur optimalen Lösung kommen.

- 87 Zahnformen: umfassende Auswahl an Front- und Seitenzähnen in allen erhältlichen Grössen
- 448 vordefinierte Setup-Optionen der Angle Klasse I
- Aufstellungen in den gängigen Okklusionsschemas Gerber, physiologisch, Gysi, lingualisiert und TiF
- Aufstellungs-Match in die Multilayer Struktur der TCR Multi Disk

Frontzahnformen	Seitenzahnformen	Kombinationen innerhalb der Zahnlinie
PhysioStar NFC ⁺	Bonartic II NFC ⁺ Condyloform II NFC ⁺	50
PhysioSelect TCR	BonSelect TCR	49
PhysioSet TCR	Bonartic TCR	42
Frontzahnformen	Seitenzahnformen	Optionale Kombinationen innerhalb der Candulor-Seitenzahnlinie
PhysioStar NFC ⁺	BonSelect TCR	25
	Bonartic TCR	25
PhysioSelect TCR	Bonartic II NFC ⁺	41
	Condyloform II NFC ⁺	40
	Bonartic TCR	49
	BonSelect TCR	41
PhysioSet TCR	Bonartic II NFC ⁺	43
	Condyloform II NFC ⁺	43
Gesamt verfügbare Kombinationen		448



Funktionell

Vordefinierte Ober- und Unterkiefer in idealisierter Okklusion führen Sie schneller zur funktionell stimmigen Aufstellung.



Effizient

Eine noch nie dagewesene Vielfalt an Individualität durch 448 Kombinationen, die Ihnen maximale Gestaltungsfreiheit und verlässliche Ergebnisse bieten.



Ästhetisch

107 Zahnformen /-größen aus bewährten Candulor-Zahnlinien in zahlreichen Größen sorgen für natürlich wirkende Ergebnisse – vom Frontzahn bis zum Molaren.

ZAHNLINIEN PORTFOLIO*

PhysioStar NFC⁺	Oberkiefer	Unterkiefer
PhysioStar NFC ⁺	15	5
Bonartic II NFC ⁺	3	3
Condyliform II NFC ⁺	3	3

PhysioSelect TCR	Oberkiefer	Unterkiefer
PhysioSelect TCR	18	4
BonSelect TCR	4	4

PhysioSet TCR	Oberkiefer	Unterkiefer
PhysioSet TCR	22	8
Bonartic TCR	5	5


* Enthaltene Zahnlinien im Angebot der Candulor Denture SmileLibrary +

OKKLUSIONSKONZEPTE

Frontzahn- formen	Seitenzahn- formen	Gerber	Gysi	Lingua- liert	Physio- logisch	TiF
PhysioStar NFC ⁺	Condyloform II NFC ⁺	✓		✓		
	Bonartic II NFC ⁺		✓		✓	✓
PhysioSelect TCR	BonSelect TCR		✓	✓	✓	✓
PhysioSet TCR	Bonartic TCR		✓		✓	✓



VERARBEITUNGSOPTIONEN


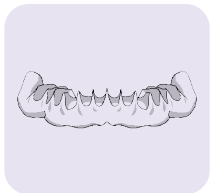


Prothesenbasis

Die Basis kann gedruckt oder gefräst werden, es können Konfektionszähne eingesetzt oder gefräste Zahnkränze verwendet werden.

Monoblock

Basis und Zähne sind in einem Stück gefertigt. Dies kann als Try-In gedruckt oder gefräst werden.

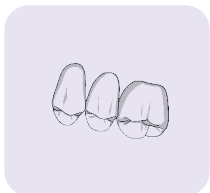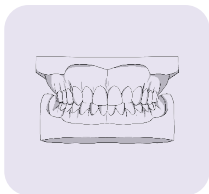


Verblockte Zahnsegmente

Die verblockten Zahnsegmente können gedruckt oder gefräst werden. Es ist möglich, einen Auftrag mit mehreren Brückensegmenten zu gestalten.

Einzelzähne


Es können einzelne Zähne gedruckt oder gefräst werden. Es ist möglich, einen Auftrag mit mehreren Einzelzähnen zu gestalten.

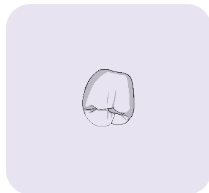

Ausführliche Informationen
sowie die Kosten finden
Sie auf der Candulor Denture
SmileLibrary + Webseite.



<https://smilelibrary.candulor.com>

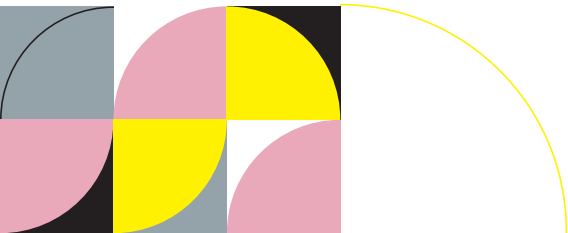



CANDULOR. HIGH END ONLY.

768626/de/2026-04-02

Candolor AG

Boulevard Lilienthal 8
CH-8152 Glattpark (Opfikon)
Schweiz
info@candolor.com
www.candolor.com

Candolor Dental GmbH

Am Riedergraben 6
DE-78239 Rielasingen-Worblingen
Deutschland



EC REP